

**DEPARTEMENT
GESUNDHEIT UND SOZIALES**
Abteilung Gesundheit

30. April 2026

HANDBUCH MOMENTUM - APP "FR AARGAU"

Grundeinstellungen

1. App Einstellungen


Nach der Freischaltung als First Responder sollten in der App bestimmte Einstellungen überprüft und bei Bedarf angepasst werden.

1.1 Login

Auf der Startseite den Button «Anmelden» wählen, E-Mail-Adresse sowie persönliches Passwort eintragen und mit «Anmelden» bestätigen. Nach erfolgreichem Login erscheint beim Signet oben links ein grüner Punkt.

Damit Alarmierungen empfangen werden, muss man eingeloggt sein.

Zudem ist eine durchgehend verfügbare **mobile Datenverbindung (Internet) erforderlich**, auch während des Einsatzes.

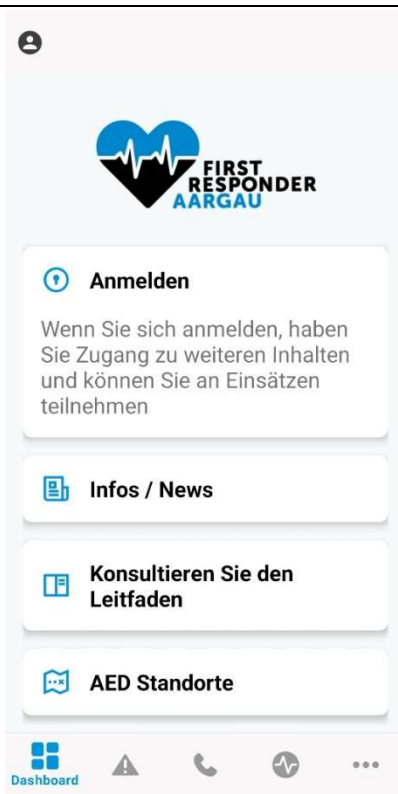

1.2 Startseite



Einstellungen: Zugriff auf alle für die App relevanten Optionen, z. B. Standortfreigabe oder Benachrichtigungen.
Durch Antippen des eigenen Namens wird das hinterlegte Zertifikat angezeigt; Passwort und Personendaten können ebenfalls angepasst werden.



Einsatzübersicht: Anzeige sämtlicher aktueller Einsätze.



Wichtige Anrufnummern: Zentral erfasste Telefonnummern, die per Fingertipp direkt gewählt werden können.



Rhythmus: Audio-Metronom mit dem vom SRC vorgegebenen Takt für die Herzdruckmassage; Start via «Starten».



Weitere Informationen: Zugriff auf Handbücher, Neuigkeiten und zusätzliche Inhalte zur App.



Willkommen

Vorname Name



Infos / News



Konsultieren Sie den Leitfaden



AED Standorte



Dashboard



1.3 Alarmierung ausschalten

In "Einstellungen" lässt sich die "Alarmierung" zentral ein- oder ausschalten.

- Regler grau: Es werden keine Alarme empfangen.
- Regler blau: Alarme werden empfangen.

Einstellungen



Vorname Name



Verfügbarkeit



Alarmierung



Bei ausgeschalteter Alarmierung erhalten sie keine Alarme mehr.



Benachrichtigungen



Standortbestimmung



Geschäftsbedingungen





Datenschutzbestimmungen



ABMELDEN

App-Version: 3.99.0

<p>1.4 Benachrichtigungen</p> <p>Vom Startbildschirm zu "Einstellungen" wechseln und «Benachrichtigungen» öffnen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Push-Benachrichtigungen zulassen" aktivieren, damit bei Ereignissen eine Pushmeldung erfolgen kann. Ansonsten erhält man keine Nachricht über das Ereignis. - Überbrückung der Modi "Nicht stören" und "Stummmodus" nach Bedarf konfigurieren; auf diese Weise ertönt die Alarmierung auch bei stummgeschaltetem Gerät. Die Option "Stummmodus überbrücken" erscheint erst, wenn "Nicht stören Modus" aktiviert ist. - Alarmtöne nach Wunsch anpassen. <p>Hinweis: Umfang und Verfügbarkeit einzelner Funktionen können je nach Smartphone variieren.</p>	
<p>1.5 Standortbestimmung</p> <p><i>Gemäss Ihrem Standort alarmieren (Georeferenzierung)</i></p> <p>Georeferenzierte Alarmierung aktivieren (Regler ist blau), um entsprechend dem zuletzt ermittelten Standort statt anhand vordefinierter Bereiche alarmiert zu werden. Siehe Handbuch "Verfügbarkeiten".</p> <p>Ortungsdienste</p> <p>Unter "Ortungsdienste" die Option "Ein".</p> <p><i>Zugriff auf Standort erlauben</i></p> <p>"Immer zulassen" (empfohlen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standortabfrage erfolgt ausschliesslich während eines Einsatzes. - Dies erhöht die Genauigkeit der Standortlokalisierung bei der Alarmierung. - So kann die SNZ 144 die Position des First Responders während eines Einsatzes auch dann sehen, wenn die App geschlossen ist. 	

1.6 Verfügbarkeiten

Individuelle Verfügbarkeiten lassen sich erfassen, um die Alarmierungszeiträume bedarfsgerecht anzupassen. Es können so viele Verfügbarkeiten erfasst werden, wie gewünscht.

- Für jeden Wochentag können separate Zeitfenster definiert werden.
- Als Standortoption steht die Auswahl bestimmter Gemeinden, genannt Bereiche und / oder die Georeferenzierung (Alarmierung gemäss aktuellem Standort) zur Verfügung. Bei Alarmierung gemäss Standort muss dieser zusätzlich unter "Einstellungen" aktiviert werden. Siehe Punkt 1.5.
- Die Alarmierung erfolgt während der definierten Verfügbarkeiten, ausserhalb dieser Zeiträume bleibt die Alarmierung inaktiv.

Details dazu sind im "Handbuch Verfügbarkeiten" zu finden.

← **Ändern**

Gruppe →
FirstResponder

Bereiche →
Verfügbar für alle Bereiche

Standort ⓘ
„Nach deinem Standort alarmieren“
ist deaktiviert, sodass du nur
für die ausgewählten Bereiche
alarmiert wirst.

Tage

MO DI MI DO FR SA S

Zeitfenster

00 : 00 → 00 : 00

Ganztägig

MO Ganztägig
TU Ganztägig
WE Ganztägig
TH Ganztägig
FR Ganztägig
SA Ganztägig
SU Ganztägig

Löschen 🗑️ **SPEICHERN**

2. Zusätzliche Funktionen

2.1 AED Standorte

Auf der Frontseite der First Responder-App auf „AED Standorte“ tippen, um die registrierten Geräte aufzuzufinden.

Für jedes Gerät werden angezeigt:

- Zugänglichkeit (z. B. 24/7h erreichbar, gemäss Öffnungszeiten)
- Rufnummer der Kontaktperson, die nach einer Nutzung benachrichtigt werden muss.

Benutzer AED melden

- Nach dem Einsatz den AED wieder an den Entnahmestort zurückbringen.
- Die in der App hinterlegte Kontaktperson anrufen und die Nutzung des AED melden.
- Dabei darf das Einsatzdatum sowie die Gemeinde für die Rückerstattung der Elektroden genannt werden. Keine weiteren Details bekannt geben.

Hinweis: Die Rückgabe des AEDs und die sofortige Benachrichtigung der Kontaktperson sind entscheidend, um die Verfügbarkeit des Geräts für zukünftige Notfälle zu sichern.

Registrierung von AED für First Responder


Damit im Notfall schnell auf einen lebensrettenden Defibrillator zugegriffen werden kann, ist es elementar, dass alle frei zugänglichen AED in der Alarmierungsapp für First Responder registriert sind.

Bitte Sie Eigentümerinnen und Eigentümer darum, ihren AED via www.ag.ch/firstresponder zu melden. Die Standorte der erfassten AED werden nachfolgend den First Respondern in der Alarmierungs-App zur Verfügung gestellt. Bitte lassen Sie den AED in jedem Fall registrieren, auch wenn er beispielsweise bereits unter www.defikarte.ch gemeldet wurde. Wir übernehmen aus Gründen der Qualitätssicherung keine Standorte aus anderen Datenbanken.



2.2 Rhythmushelfer

Um bei der Herzdruckmassage die korrekte Frequenz von 100–120 Kompressionen pro Minute einzuhalten, kann in der App der akustische Rhythmusticker gestartet werden.

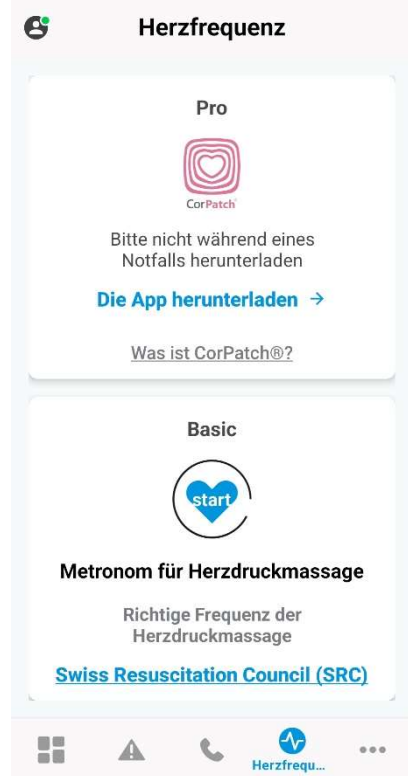

2.3 Infos / News

Unter Infos / News sind diverse Benachrichtigung zu finden wie zum Beispiel Neuerungen in der App oder allgemein im Bereich First Responder.

2.4 Dokumente

Auf die drei Punkten rechts unten tippen, dann Dokumente und die die gewünschten Unterlagen im pdf-Format öffnen.

